

Modelo: Lacrifresh Ocu-Dry 0,30% Aptar 10 ml.

EF Troquel: TRO-PROS-013

dimensiones: 400 x 150 mm

Código: PROS898.2

cha: 18/12/2019

IZOR

acrifresh®
ocu-dry

150 mm

**PRESERVATIVE
FREE**

lubricating and hypotonic ophthalmic solution to relieve the symptoms of moderate to severe ocular dryness

400 mm

delo: Lacrifresh Ocu-Dry 0,30% Aptar 10 ml.

F Troquel: TRO-PROS-013



Dimensiones: 400 x 150 mm

digo: PROS898.2


acha: 18/12/2019



[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

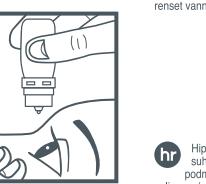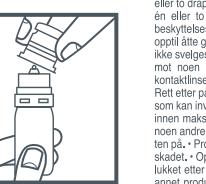

150 mm

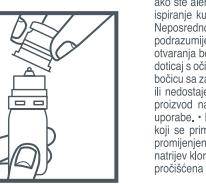

Lubrikacyjny hypotoniczny oczny roztok na zmierzonej przerwach stredne zazwyczajne az zazwyczajnego suchego oka. BEZ KONZERVATORU. OPIS: **Lactifresh Ocu-Dry 0.3%** je hypotoniczny roztok oczny na wodzie i glicerynowym solowym podstwie, pozywiony odcinkami polimerem hyaluronanu sodynu, pozywiony z glicerynow i esencjalnym elektrolitem utrany enzymatycznie przerwach stredne zazwyczajne az zazwyczajnego suchego oka a na lubrifikacy wesczykow kontaktowych i szopek. Dlatego swojej glowej texture jest produkt wielu wdrozny na pouzitec noci, cm sa predstavlja jedy uicnot poczape spasku. POUZIVANIE: **Lactifresh Ocu-Dry 0.3%** je u: - Dludobze zmierzenie symptomow stredne zazwyczajne az zazwyczajnego suchego oka he neprzejemciow pocit, ktere nie su klinicky patologiczni, jak je paleenie, surbenie, pocit noko ale oboce pocit czudejstwa teleposka na lewej oku. Telo niesprjemnoscu su sposobene my faktom, ze npakupridz prach, dyn, suchy srodstwo, dludobze pozuwanie poletadla, narawna nerownosci (migrena), refrakcyjna chirurgia (LASIK). - Lubrikacyjny roztok na wodzie i glicerynowy solowy. Przed użyciem w godzinach zlodzonych, biorac do ruk, zmywac ruky, zmywac twarz, oczy i nos. - W godzinach wieczornych pozuwanie na godzinach udrabiania i zmywac ruky, oczy i nos. NAVOD NA POUZITEC: 1. Pierw pouzilim tohto produktu si unite, uplychnite na ruky, 2. Vezmity flasciklu **Lactifresh Ocu-Dry 0.3%**, otocze bezpoznamy udrozem protu jednu alebo dve krypky a nejakou krat zazkrajte. 4. Pouzilte s kontaktnymi szopek: sled jednu alebo dve krypky na vonkajsi povrch kaedzej szopky, kym su vlozenje, alebo pred vlozeniem alebo naneiste jednu alebo dve krypky do wnutrejka samej kaedzej szopky pred neneim na oko. 5. Po kazdom padom nasadce ochronne wiecko. 6. Produkt podla potreby max. 8 krat dennie. DATUM poslednej upravy: 2018/06/PREVENTIVNATOPRATENIE: 1. Ako je vyskytuje achatolozna mala infekcia. 2. Neponuzujte produkt cez alegriku, kremu, gels, plechy, masky, kremy, emulzje, toniky, emolienty, pouzitie Szopky akustyczne, aby nelykhejte vodu z vodovodu. 3. Ak u sa vyskyne podkrotenie oka, alebo reakzia nezadruha, ce sa na odberom lekcia. Biezeprodote po naneiseni je mozn roznamerenie videnie. Pred znamenim cistopis, pri ktorich moze roznamerenie videnie predstavovať aktelekov riziko, poskata, ulo komantinami, davate pozor, aby sa spicka flasciklu nedostala do kontaktu s okami, s inym povrchom. Neslažejte flasciklu s nastavenim wieckom. Neponuzujte produkt, ak uzivatel prebiehol z povrchu teplote. 4. Neponuzujte produkt po uplynutiu datumu najnowszej pouzitia. Tento produkt neponuzujte spolu s antykongreskou. 5. Neponuzujte produkt, ak je zly uveden datum v expiraci. 6. Bez toho, ze sa predstavili s vysnym lekarstvom, lekarom. Mesto byt a zmena ukonczenia dochodkov. ZLOZENIE: Hyaluronat sodny 0.30 g.; glycerin; pozywion; chlorid sodny; chlork chlorid; chlorid draselnicy; chlork wanapety; kyselina borita; borax dehydrat; cistena voda 100

hu
C
amejí a myslí kombinaci enyhětých kvátků
ALKALI a sůlou-
pejdálka a kellem-
számító
garázdu
kezimály
HASZN
meg a
óramátr
Cséppen
vel együtt
alatt vag
a szemre
6. A kezimály
kezimály
Ne alkalmaz
lencsákkal
forduljon
addig, a
homály
A szenn
szemével
• Ha a
kezimály
kezimály
szem fo
miel m
povidon
és 100 m

Hipotonična oftalmična raztopina za mazanje je lajanje simptomov znenje do izrazito suhega očesa. **NE VSEBLJUJE KONZERVANSOV, OPIK**. Izdelek **Lazethac Ocu-Dry 0.5%** je hipotonična večomerna oftalmična raztopina za mazanje brez konzervansov in sestavljena iz vlažilnih polimerov (natrijevega hialurona, povidona in glicerina) in esencialnih materialov, ki se uporablja za blaženje simptomov znenja do izrazito suhega očesa in mazanje kontaktnih leč. Zaradi gelne teksure je zelo primeren za uporabo ponocí, in je tudi med spanjem. **Uporaba: Lazethac Ocu-Dry 0.5%** je indiciran za: • Podaljšano življenje, kot je skrebljenje, razprševanje oči in občutek tujka na površini očesa. To nelažejo drugim povzročajo razprtji dejavniki, kot so prah, smetja, solne očode, pojaljana upora alkohola, hormono neravnovesje (menopavza), refraktivni posrek (LASIK). • Raztopina je primerna za uporabo med spanjem, saj ohranja oči navlaženo vse do sveta. **NAVODOLA ZA UPORABO:** 1. Pred uporabo treba izdelka umjeti, zpeniti v poseku ruke. 2. Vzemite stečenkino izdelka Lazethac Ocu-Dry 0.5% povezte varnostno temljo v smeri umagi, kozanje in odstranite pri pokrovku. 3. Neposredno uporabite mestno eno ali dve kapljic v vsako oko in nekajkrat po 4-5 ur. 4. Uporabljajte raztopino do izteku. Če je potrebno, lahko dodate eno lepo leto in neštejanje ali preden jih odstrane, preden jih nameste v oči ali napolniti v apotekarji v notranji del vsake leče. 5. Po vsaki uporabi znova zoperi zaščitni pokrovek. 6. K uporabljaju po potrebi, največ 8-krat na dan. Datum zadnje revizije: 2018/08.

IDNOSTNI UKREP: - Raztopine ne užirajte in jo shranjujte nedosegljivo otrokom, - Izdelek uporabljajte, če ste alergični na kateri koli izmed sestavin. - Za izpiranje ali vzdrževanje leč ne uporabujte vode iz vodovoda. - Če se pojavijo držanje oči ali neželeni učinek, se posvetujte z očeskim častistom. - Takoj po vklapanju kostne mreži imel zamagljen vid. Preden začnete izvajati leč, ki bi lahko vključevalo kaksno bol mreži, mora imeti zamagljen vid. Preddosečki, da konica ne pride v stik z očmi ali drugimi površinami, da preprečite kontaminacijo. - Ne stiskajte črnice, ko je na njej zaščitni pokrovek. - Ne uporabljajte izdelka, če je varnostno temljo podaljšalo do ga in ali, če je stečenka poškodovana. - Izdelek shranjujte pri sobni temperaturi, ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. - Stečenkino po vsaki uporabi ne uporabljajte sosoči s ali na katerem koli drugem delu telesa, ne uporabljajte na površini ustnic, saj lahko to dovoljuje obziv izdelka. **SESTAVA:** Natrijev hialuronat 0.30 g, glicerin, solanum, solanum, kalcij klorid, kalij klorid, borova kislina, natrijev tetraborat dekhanidat, cesta voda 100 ml.